

EXray[®] 30

Vis en PEEK sans tête
canulée compressive pour
petits fragments osseux

Ø 3,0 mm



SynchroMedical

The interphalangeal reference

EXray® 30 PEEK

Vis auto-compressive canulée

DESCRIPTION

Les vis de compression EXRAY® 30 ont une âme de Ø2 mm et un diamètre extérieur de 3 mm. La vis est préparée avec un foret de 2 mm et ensuite avec un taraud pour optimiser son ancrage.

La vis de compression EXRAY® 30 est disponible en différentes longueurs allant de 13 à 31 mm.

Les vis EXRAY® 30 sont fabriquées en PEEK selon la norme ASTM F2026.


- Vis en PEEK auto compressive canulée Ø3,0 mm
- Les vis en PEEK sont radiotransparentes
- Module d'élasticité proche de celui de l'os
- Perçage et taraudage obligatoires
- Préparation de la première corticale obligatoire
- Empreinte hexalobulaire T7



RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Implants

HVP3011.....L 11 mm HVP3023.....L 23 mm
 HVP3013.....L 13 mm HVP3025.....L 25 mm
 HVP3015.....L 15 mm HVP3027.....L 27 mm
 HVP3017.....L 17 mm HVP3029.....L 29 mm
 HVP3019.....L 19 mm HVP3031.....L 31 mm
 HVP3021.....L 21 mm

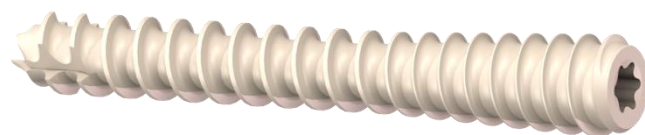

Instruments

	HV9010	MANCHE AO
	HV9140	TOURNEVIS LONG CANULÉ T7
	HV9005	MESUREUR SUR BROCHE
	HV9011-1	CONTENEUR POUR BROCHES
	HV9016	EXTRACTEUR DE VIS
	HV9131-013	TARAUD CANULÉ
	HV9131-031	à
	KW10100TR	BROCHE DE KIRSCHNER AVEC POINTE TROCART
	HV9040-013	à
	HV9040-031	MÈCHE ETAGÉE CANULÉE
	HV9115	EXRAY® CONTAINER À INSTRUMENTS
	HV9020	JAUGE DE PROFONDEUR

All rights reserved © Pictures non-contractual