

ToeGrip[®] Classic

Premier implant
interphalangien en
PEEK avec plus de
50'000 dispositifs
implantés



SynchroMedical

The interphalangeal reference

ToeGrip® Classic


Implant interphalangien

DESCRIPTION

L'implant ToeGrip® Classic consiste en un implant monobloc doté de trois bras flexibles intramédullaires insérés dans chaque partie de phalange. Les bras sont reliés par un profilé en forme de T. Le concept de fixation repose sur une insertion en force (press-fit) de l'implant grâce à sa forme effilée et aux macrostructures solidement ancrées une fois impactées, évitant ainsi tout déplacement de l'implant.

L'implant ToeGrip® Classic est destiné à un usage unique et est disponible dans une gamme de 5 tailles avec 3 angulations possibles : 0°, 10° ou 20°.

ToeGrip® Classic est fabriqué en PEEK selon la norme ASTM F2026.

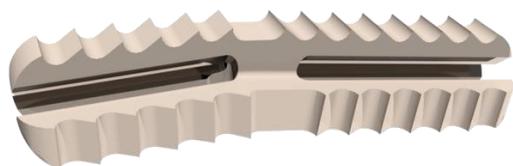

Preuve clinique

Le ToeGrip® Classic a plus de 10 ans d'expérience clinique avec des publications dans des revues avec comité de lecture. Depuis 2010, plus de 50 000 cas ont été traités avec succès.

Publications

Interphalangeal Arthrodesis of the Toe With a New Radiolucent Intramedullary Implant.

Foot & Ankle Specialist Review. Dec 2015

Diebold P, Rocher H, Determe P, Cermolacce C, Guillo S, Averous C, Lieber Wackenheim F.

A Midterm Review of Lesser Toe Arthrodesis With an Intramedullary Implant.

Foot & Ankle Specialist Review. Oct 2017

James Lee Harmer, FCPodS, MSc, BSc(Hons), Anthony Wilkinson, FCPodS, MSc, DpodM, and Anthony John Maher, FCPodS, MSc, BSc(Hons).

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Instruments

TG0240-Starter		COMPACTEUR P1 - STARTER - EMBOUT AO
TG0240-XS		COMPACTEUR P1 - XS - EMBOUT AO
TG0240-SS		COMPACTEUR P1 - S - EMBOUT AO
TG0240-MM		COMPACTEUR P1 - M - EMBOUT AO
TG0240-LL		COMPACTEUR P1 - L - EMBOUT AO
TG0241-Starter		COMPACTEUR P2 - STARTER - EMBOUT AO
TG0241-XS		COMPACTEUR P2 - XS - EMBOUT AO
TG0241-SS		COMPACTEUR P2 - S - EMBOUT AO
TG0241-MM		COMPACTEUR P2 - M - EMBOUT AO
TG0241-LL		COMPACTEUR P2 - L - EMBOUT AO
TG0203		FOURCHETTE DE RÉDUCTION
TG0009		PORTE-IMPLANT TAILLE XS
TG0006		PORTE-IMPLANT TAILLE S
TG0007		PORTE-IMPLANT TAILLE M
TG0008		PORTE-IMPLANT TAILLE L
TG0010		FRAISE À CALCAR
HV9010		MANCHE AO
TG1013		ToeGrip® CONTAINER À INSTRUMENTS

Implants

TGXS00	ToeGrip® Classic EXTRA-SMALL 0°
TGXS10	ToeGrip® Classic EXTRA-SMALL 10°
TGXS20	ToeGrip® Classic EXTRA-SMALL 20°
TGSS00	ToeGrip® Classic SMALL 0°
TGSS10	ToeGrip® Classic SMALL 10°
TGSS20	ToeGrip® Classic SMALL 20°
TGMM00	ToeGrip® Classic MEDIUM 0°
TGMM10	ToeGrip® Classic MEDIUM 10°
TGMM20	ToeGrip® Classic MEDIUM 20°
TGLL00	ToeGrip® Classic LARGE 0°
TGLL10	ToeGrip® Classic LARGE 10°
TGLL20	ToeGrip® Classic LARGE 20°